



Analizadores semiautomáticos
para la coagulación

▲BIO SOLE▲ 2 & ▲BIO SOLE▲ 4



www.biolabo.fr



BIO SOLEA 2 BIO SOLEA 4



Práctico y compacto

Analizadores semiautomáticos 2 y 4 canales para la hemostasia

Su coagulómetro de rutina

- Sistema de detección optomecánico
- Puesta en marcha automática de la medida
- Sistema abierto sin mantenimiento

Coagulómetro 2 canales BIO SOLEA 2



Coagulómetro 4 canales BIO SOLEA 4



BIOLABO
Diagnostics




Todos los análisis de rutina

- TP (Tiempo de Protrombina)
- TCA (Tiempo de Cefalina Activada)
- TT (Tiempo de Trombina)
- Fibrinogeno
- Más 4 posiciones libres para los factores de coagulación

Simple y automático

- Funciona con cualquier pipeta standard
- Autocontrol en el momento de enchufar
- Mensaje de espera TEMP LO hasta alcanzar la temperatura de trabajo
- Gestión automática de la incubación después de inserción de las cubas muestras
- Puesta en marcha automática de la medida por agregado del reactivo
- Resultados calculados, mostrados e impresos automáticamente

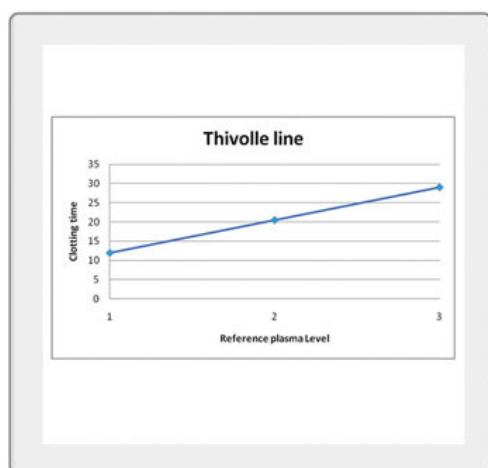

Características técnicas* del Coagulómetro 2 / 4 canales BIO SOLEA 2 / 4

- Entregado con distribuidor de bolas y consumibles de puesta en marcha
- Principio de medida: opto-mecánico (óptico y mecánico)
- Alimentación: 110/220 V 50–60 HZ

BIO SOLEA 2

- Consumo : 20 VA
- Dimensiones Neto: 31 cm x 12,5 cm x 11 cm
- Dimensiones Bruto: 40,5 cm x 30,5 cm x 18 cm
- Peso Neto: 2,2 kg
- Peso Bruto: 4,2 kg

BIO SOLEA 4

- Consumo : 30 VA
- Dimensiones Neto 33 cm x 25 cm x 11 cm
- Dimensiones Bruto: 40,5 cm x 31 cm x 27,5 cm
- Peso Neto: 4,8 kg
- Peso Bruto: 6,8 kg
- Agitador magnético para reactivos

Impresora (en opción)

Impresora térmica
+ 1 CABLE de conexión + 2 rulos de papel térmico

*BIOLABO se reserva el derecho de proceder sin previo aviso a modificaciones técnicas.

Características comerciales

Varios miles de ejemplares vendidos en el mundo bajo el nombre de distintas marcas prestigiosas.



Servicio Técnico

- Ingenieros Química-Clinica responden a sus preguntas clínicas.
Pour plus de détails Para más detalles, contáctenos.
- Video Tutorial disponible para un fácil aprendizaje.



BIO SOLE 4

BIO SOLE 2



Les Hautes Rives
02160 MAIZY
France

Tél. + 33 (0)323 251 550
Fax + 33 (0)323 256 256

BIOLABO
Diagnostics 



adv@biolabo.fr



support@biolabo.fr

Distribuidor:

version: 22 / 01 / 2019

www.biolabo.fr

