



Analyseurs semi-automatiques pour la coagulation

▲BIO SOLE▲ 2 & ▲BIO SOLE▲ 4



www.biolabo.fr



BIO SOLEA 2 BIO SOLEA 4



Pratique et compact

Analyseurs semi-automatiques 2 et 4 canaux pour l'hémostase



Votre coagulomètre de routine

- Système de détection optomécanique
- Déclenchement automatique de la mesure
- Système ouvert sans maintenance



Coagulomètre 2 canaux BIO SOLEA 2



Coagulomètre 4 canaux BIO SOLEA 4



BIO LABO
Diagnostics 




Toutes les analyses de routine

- TP (Temps de Prothrombine)
- TCA (Temps de Céphaline Activée)
- TT (Temps de Thrombine)
- Fibrinogène
- Plus 4 positions libres pour les facteurs de coagulation



Simple et automatique

- Fonctionne avec toute pipette standard
- Autocontrôle à la mise sous tension
- Message d'attente TEMP LO jusqu'à la température de travail
- Gestion automatique de l'incubation après insertion des cuvettes échantillons
- Déclenchement automatique de la mesure par ajout du réactif
- Résultats calculés, affichés et imprimés automatiquement

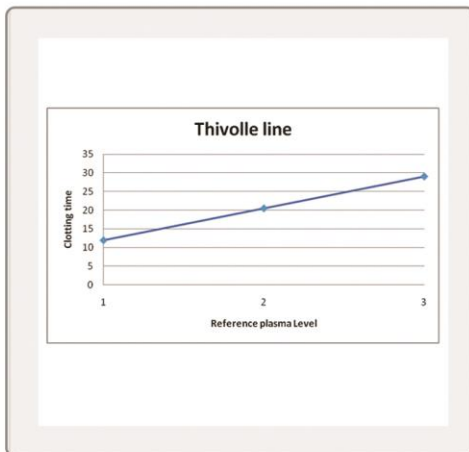

Caractéristiques techniques* du Coagulomètre 2 / 4 canaux BIO SOLEA 2 / 4

- Livré avec distributeur de billes et consommables de démarrage
- Principe de mesure : opto-mécanique (optique et mécanique)
- Alimentation : 110/220 V 50-60 HZ

BIO SOLEA 2

- Consommation : 20 VA
- Dimensions Net: 31 cm x 12,5 cm x 11 cm
- Dimensions Brut : 40,5 cm x 30,5 cm x 18 cm
- Poids Net : 2,2 kg
- Poids Brut : 4,2 kg

BIO SOLEA 4

- Consommation : 30 VA
- Dimensions Net: 33 cm x 25 cm x 11 cm
- Dimensions Brut : 40,5 cm x 31 cm x 27,5 cm
- Poids Net : 4,8 kg
- Poids Brut : 6,8 kg
- Agitateur magnétique pour réactifs

Imprimante (en option)

Imprimante thermique
+ 1 CABLE de connexion + 2 rouleaux de papier thermique

*BIOLABO se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications techniques.



Caractéristiques commerciales

- Plusieurs milliers d'exemplaires vendus dans le monde sous différentes marques prestigieuses.





Service Technique

- Des ingénieurs Chimie-Clinique répondent à vos questions techniques. Pour plus de détails contactez-nous.
- Tutoriel vidéo disponible pour un apprentissage facile.



▲ **ABIO SOLE** ▲ 4

▲ **ABIO SOLE** ▲ 2



Les Hautes Rives
02160 MAIZY
France

Tél. + 33 (0)323 251 550
Fax + 33 (0)323 256 256

BIOLABO
Diagnostics 



adv@biolabo.fr



support@biolabo.fr

Distributeur :

version: REL/DOCOM/0009 - V1



www.biolabo.fr